

English

AH!YES is the USA version of YES products, offering the same great product and excellent customer service, but with a new name especially for the USA!

Please read this leaflet carefully before use.

AH!YESVM Vaginal Moisturizing Gel

AH!YESVM water-based organic vaginal moisturizing gel uses a patented technology to provide natural, long-lasting moisture to dry vaginal mucosa.

Provides symptomatic relief from:

- Vaginal dryness
- Vaginal Atrophy
- Itching
- Irritation, burning and soreness
- Dyspareunia.

Temporary vaginal dryness can have various origins: after childbirth, when breastfeeding, and when taking oral contraceptives. Certain anti-depressants and anti-histamines can cause intimate dryness, as can extreme stress.

Description

- A soft, clear bio-adhesive gel
- Discreet no smell, taste, color, stickiness or fallout. Close to the texture and feel of a woman's own lubrication
- pH matched to restore and stabilize the protective acidity of the intimate environment at pH4, supporting vaginal health.
- Hormone-free
- Not made with any known skin irritants (no glycerine, no hormones, no gluten, no petrochemicals, no parabens).
- Gentle and natural, for even the most sensitive conditions
- Guaranteed natural and pure by its certified organic status
- Recommended by Health Care Professionals and trusted by women to bring soothing, safe and welcome relief to the debilitating symptoms of menopausal dryness
- A non-hormonal natural alternative to synthetic chemical intimate moisturizers.
- Case studies show that AH!YESVM is fast-acting and long-lasting while replenishing intimate moisture safely and naturally.

AH!YESVM is available in 3.4fl oz. tubes and packs of 6 pre-filled applicators.

Directions for use – AH!YESVM in tube

(see overleaf for applicator directions for use)

This product is a soft clear gel, easy to dispense and distribute, and is designed for finger application, which allows you to decide how much you want to put where. Simply squeeze the soft gel on to your hand and use your finger tips to apply the desired amount to the vaginal tissues. AH!YESVM may also be used to moisturize the labia. (No applicator included).

Indications for Use

AH!YESVM vaginal moisturizer is a personal lubricant for vaginal and penile application, intended to moisturize and lubricate, to enhance the comfort and ease of intimate sexual activity and supplement the body's natural lubrication. AH!YESVM vaginal moisturizer is compatible with natural rubber latex and polyisoprene condoms. This product is not compatible with polyurethane condoms.

Ingredients

Aqua, Linum usitatissimum (flax) extract*, Aloe barbadensis leaf juice powder (aloe vera)*, Cyamopsis tetragonolobus (guar gum)*, Ceratonia siliqua (locust bean gum)*, Sodium chloride, Xanthan gum, Potassium sorbate, Citric acid, Phenoxyethanol.

* Organically grown ingredients.

Certified 95% Organic by the Soil Association, Bristol UK

Protected by International Patents.

Storage: Replace cap when not in use. Store in a cool dry place between 5-30°C. Use before expiry date. Keep out of direct sunlight.

Caution: AH!YESVM is not a contraceptive or a spermicide.

Warning: If the seal on any tube enclosed is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase. If irritation or discomfort occurs, discontinue use. If symptoms persist, seek medical advice.

Why certified organic?

When you buy something that is certified organic, not only are you making the best choice for your own wellbeing, your purchase is also supporting a system that respects human health, animals,

wildlife and the environment. Certified organic products meet stringent standards and organic certification is your assurance that our ingredients and products have been grown and processed according to strict procedures. Production, processing, distribution and sales are monitored to maintain the finest organic and ecological integrity.

Packaging and recycling

AH!YES aims to minimize the environmental impacts of all our packaging. So please do help us achieve that aim. All our bottles are MDPE. Polyethylene (MDPE) is the most widely accepted plastic by recycling centers. The cartons, boxes and package inserts can all be recycled.

100% Guarantee: AH!YES products are 100% satisfaction guaranteed. Please contact us by telephone or email if you have any concerns or questions about this guarantee.

Certified Organic by: The Soil Association, Bristol, UK.

Approved by: The Vegetarian Society.

Manufactured in Great Britain for

Bio-Tech Lubricants Ltd, Contact: The Timber Barn, Selborne Road, Greatham, Liss, Hampshire, GU33 6HG, UK.

AH!YES logos are registered trademarks of YES Syzygy Ltd.

Please contact us by telephone or email if you have any concerns or questions.

Contact us

USA Toll Free: 1-888-777-0125

Website: www.ahyes.org

Email: help@ahyes.org

Our love for Planet Earth is reflected in everything we do – creating glorious products that are amazing to use, kind to the environment, respectful of all life and natural.

Truly, madly, deeply natural.

Sarah and Susi
AH!YES Founders

See our full range overleaf



XAMFUM_V1_02/19

MADE WITH SAFE INGREDIENTS

MADE SAFE

MADE SAFE SCREENS
INGREDIENTS FOR KNOWN:

- ✓ BEHAVIORAL TOXINS
- ✓ CARCINOGENS
- ✓ DEVELOPMENTAL TOXINS
- ✓ ENDOCRINE DISRUPTORS
- ✓ FIRE RETARDANTS
- ✓ HEAVY METALS
- ✓ NEUROTOXINS
- ✓ HIGH RISK PESTICIDES
- ✓ REPRODUCTIVE TOXINS
- ✓ TOXIC SOLVENTS
- ✓ HARMFUL VOCs

It is imperative to follow manufacturer guidelines for use of certified products.

WWW.MADESAFE.ORG

2°C - 30°C Storage conditions

Single use

Expiry date

Refer to the instructions for use

Español

AH!YES es la versión de los productos YES para EE.UU., la cual ofrece los mismos grandes productos y un excelente servicio al cliente, ¡pero con un nuevo nombre especialmente para los Estados Unidos!

Por favor lea este folleto atentamente antes de usar.

Gel Hidratante Vaginal AH!YES VM

El Hidratante Vaginal orgánico de base acuosa AH!YES VM utiliza tecnología patentada para brindar una hidratación natural y prolongada a la mucosa vaginal seca.

Proporciona alivio sintomático para:

- Sequedad vaginal
- Atrofia vaginal
- Comezón
- Irritación, ardor y molestias
- Dispareunia.

La sequedad vaginal temporal puede tener su origen en el posparto, durante la lactancia, y el tomar anticonceptivos orales. Ciertos antidepresivos y antihistamínicos pueden provocar sequedad íntima, al igual que el exceso de estrés.

Descripción

- Gel bioadhesivo suave, transparente.
- Discreto sin olor, sabor, color, viscosidad o efectos. Con una sensación y textura similares a la propia lubricación femenina.
- pH compatible para estabilizar y restaurar la acidez protectora del ambiente íntimo al pH4, en apoyo de la salud vaginal.
- Libre de hormonas
- No contiene ninguno de los irritantes de la piel conocidos (sin glicerina, gluten, hormonas, petroquímicos ni parabenos).
- Suave y Natural, incluso para los estados más sensibles
- Garantizado como natural y puro gracias a su condición de orgánico.
- Recomendado por profesionales de la salud y elegido por las mujeres para brindar alivio, seguridad y tranquilidad a los síntomas debilitantes de la sequedad en la menopausia.
- Una alternativa natural no hormonal a los hidratantes íntimos con químicos sintéticos.
- Estudios muestran que AH!YESVM actúa de forma rápida y prolongada mientras repone la hidratación íntima de manera natural y segura.

AH!YESVM está disponible en tubos de 3.4fl oz. y paquetes con 6 aplicadores prellenados.

Instrucciones de uso – AH!YESVM en tubo

(vea al dorso las instrucciones de uso del aplicador)

Este producto es un gel suave transparente, fácil de administrar y distribuir; y diseñado para aplicar con los dedos, lo cual le permite decidir cuánto desea ponerse y en dónde. Simplemente apriete el gel suave sobre su mano y utilice la punta de sus dedos para aplicar la cantidad deseada en los tejidos vaginales. AH!YESVM también puede usarse para humectar los labios. (No se incluye el aplicador).

Indicaciones de uso

El hidratante vaginal AH!YESVM es un lubricante personal que se puede aplicar en el pene y en la vagina, pensado para lubricar e hidratar, con el fin de mejorar el bienestar y la facilidad en la actividad sexual y complementar la lubricación natural del cuerpo. El hidratante vaginal AH!YESVM es compatible con preservativos de látex de caucho natural o de poliisopreno. Este producto no es compatible con preservativos de poliuretano.

Ingredientes

Agua, extracto de lino*, aloe vera*, goma guar*, goma garrofin*, cloruro de sodio, goma

xantana, sorbato potásico, ácido cítrico, fenoxietanol.

* Productos orgánicos.

Certificado como 95% orgánico por The Soil Association, Bristol, GB.

Protegido por patentes internacionales.

Almacenamiento: Reemplazar la tapa cuando no se lo use. Conservar en un lugar fresco entre 5-30 °C. Usar antes de la fecha de vencimiento. No exponer a la luz solar directa.

Precaución: AH!YESVM no es un anticonceptivo ni un espermicida.

Advertencia: Si el sello de cualquier tubo incluido está abierto o dañado, NO USAR, devolver al lugar de compra. En caso de irritación o malestar, suspender su uso. Si los síntomas persisten, consultar con un médico.

¿Por qué certificado como orgánico?

Al comprar algo que está certificado como orgánico, no solo está tomando la mejor decisión para su bienestar sino que, con su compra, está apoyando un sistema que respeta la vida humana, los animales, la vida silvestre y el medioambiente. Los productos certificados como orgánicos cumplen con normas estrictas y la certificación orgánica es su

garantía de que nuestros ingredientes y productos han sido cultivados y procesados conforme a procedimientos estrictos. Tanto la producción, el procesamiento y la distribución como así también las ventas son controladas para mantener una excelente integridad ecológica y orgánica.

Embalaje y reciclaje

AH!YES busca minimizar los impactos ambientales de todos sus envases. Por eso le pedimos que nos ayude a alcanzar ese objetivo. Todas nuestras botellas son de MDPE. El polietileno (MDPE) es el plástico más aceptado en centros de reciclaje. Tanto las cajas como los cartones y paquetes pueden ser reciclados.

Garantía del 100%: Los productos de AH!YES ofrecen satisfacción garantizada al 100%. Si tiene consultas o inquietudes sobre esta garantía, envíenos un correo electrónico o comuníquese telefónicamente.

Certificado como orgánico por: The Soil Association, Bristol, GB.

Aprobado por: The Vegetarian Society.

Fabricado en Gran Bretaña por

Bio-Tech Lubricants Ltd, Contact: The Timber Barn, Selborne Road, Greatham, Liss, Hampshire, GU33 6HG, UK.

Los logotipos AH!YES son marcas registradas de YES Syzygy Ltd.

Si tiene consultas o inquietudes, envíenos un correo electrónico o comuníquese telefónicamente.

Contactenos

Número gratuito EE.UU.: 1-888-777-0125

Sitio web: www.ahyes.org

Correo electrónico: help@ahyes.org

Nuestro amor por el planeta tierra se refleja en todo lo que hacemos, creando productos espléndidos e increíbles de usar, que respetan el medioambiente, y son naturales.

Increíblemente, plenamente, verdaderamente naturales.

Sarah y Susi
Las fundadoras de YES

Veá nuestra gama completa al dorso.



2°C - 30°C Condiciones de almacenaje

De un solo uso

Fecha de caducidad


Consulte las instrucciones para usar

AH!YES[®] VM
Vaginal moisturizing gel


AH!
YES[®]
Natural Intimate Health

Directions for use – AH!YESVM in pre-filled Applicators

When you want to reach higher in the vagina, this product offers you a discreet and convenient way to deliver lubrication and moisture in the right amount to the source of discomfort.

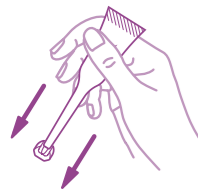

1 Shake down the applicator
Agite el aplicador

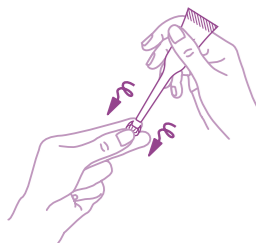


2 Twist off the top
Gire la tapa

Instrucciones de uso – AH!YESVM en aplicadores prellenados


Este producto le ofrece una manera conveniente y discreta de proporcionar hidratación y lubricación a la fuente de malestar en la cantidad adecuada, cuando busca tener un mayor alcance en la vagina.



a)
How to insert the applicator when sitting
Cómo colocarse el aplicador sentado

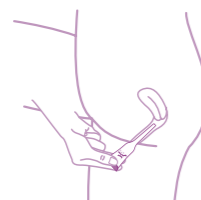


b)
How to insert the applicator when standing
Cómo colocarse el aplicador parado

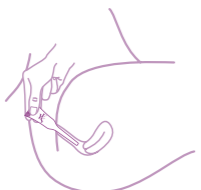

c)
How to insert the applicator when lying
Cómo colocarse el aplicador acostado

3 The applicator can be inserted from three different positions, according to personal ease and preference:
Se puede colocar el aplicador desde tres posiciones diferentes, según la facilidad y preferencia personal:

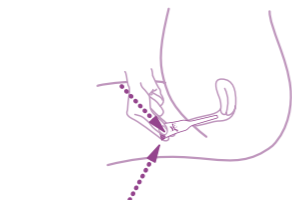

4 When inserted, squeeze the end of the applicator several times to release product high into the vagina
Tras colocar el aplicador, comprima el extremo del mismo varias veces para liberar el producto dentro de la vagina



5 When emptied, squeeze the end of the applicator to withdraw it safely
Una vez vacío, comprima el extremo del aplicador para retirarlo de manera segura.



6 Please dispose of the applicator tube and top by recycling
Elimine tanto el aplicador como su tapa recicándolos.

AH!YESVM frequency of use:

A 5ml application used every 2-3 days is typically sufficient to maintain a moist comfortable vagina.

Cases of severe dryness will benefit from more frequent use (can be used daily) initially until improvement is gained.

If using to alleviate painful sex, apply as required before intercourse and to ensure comfort afterwards.

Iso-tonic*. The iso-tonic/iso-osmotic nature of YESVM is carefully matched to human tissues. Why is this balance important? Products which are hyper-tonic (often containing chemicals such as glycerine and glycols) can cause irritation to intimate tissues*. Being iso-tonic/iso-osmotic* YESVM protects against such irritation.

*for more details see website

Frecuencia de uso del AH!YESVM:

Normalmente es suficiente una aplicación de 5 ml cada 2-3 días para mantener una vagina cómoda e hidratada.

Los casos severos de sequedad se beneficiarán de un uso inicial más frecuente (puede usarse diariamente) hasta que se logre una mejoría.

Si se usa para aliviar el dolor durante el coito, aplíquelo antes de la relación sexual y después, según sea necesario, para garantizar el alivio.

Isotónico*. La naturaleza isotónica/isoosmótica de YESVM está cuidadosamente adaptada a los tejidos humanos. ¿Por qué el balance es importante? Los productos que son hipertónicos (a menudo contienen químicos como glicerina y etilenglicol) pueden irritar los tejidos íntimos. Al ser isotónico/isoosmótico*, YESVM protege contra esta irritación.

*Para más detalles visite la página web

The AH! YES range

Whether you use a little or a lot, for pleasure or for health, discover the full AH! YES collection of natural and organic intimate products, in a range of sizes and variants to meet your differing needs.



AH!YES WB

Is an intimate lubricant formulated to hydrate and revitalize dry vaginal tissues and alleviate discomfort. AH!YES WB is pH matched to the typical vaginal environment. Maintaining typical vaginal pH may help prevent Thrush and bacterial infections.



AH!YES OB

Is a plant-oil based, longer-lasting lubricant and intense moisturizer, which is soothing and richly emollient. Nourishes delicate intimate tissues. Not condom compatible.



AH!YESVM (Vaginal Moisturiser)

Is a long-lasting vaginal moisturizer. Designed to match the typical vaginal environment with none of the skin damaging or concerning chemicals typically found in vaginal moisturizers.



AH!YES CLEANSE

Is a sensitively formulated intimate wash, designed to respect the delicate vaginal ecology, with a refreshing and effective cleansing action. Available in Unfragranced and Rose.

AH! YES

Natural Intimate Health